

A Tecnologia Cria o Melhor Sorriso.

Sobre a Besmile

A Besmile é uma empresa que oferece soluções digitais completas para odontologia restauradora e implantodontia, com materiais integrados de alta qualidade, sistemas CAD/CAM e implantes de alta precisão. Todos os produtos principais são 100% desenvolvidos e fabricados internamente -- da pesquisa e desenvolvimento à produção -- garantindo um controle de qualidade excepcional.

Com a confiança de mais de 1.000 parceiros em mais de 100 países e regiões, oferecemos soluções odontológicas impulsionadas pela inovação, com uma expertise totalmente integrada. Potencializamos laboratórios e clínicas odontológicas com fluxos de trabalho digitais otimizados, que aumentam a precisão e a eficiência.



Chengdu Besmile Biotechnology Co.,Ltd.

www.bsmdental.com

T: +86-28-85317108

E: info@cdbesmile.com


Besmile Dental America Inc.

20311 Valley Blvd, Suite#1, Walnut, CA91789

T: (626)921-5798

E: sales@bsmdentalus.com

Contact Us

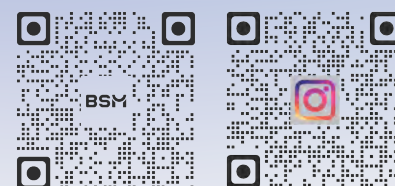

f in @Besmile @besmile_aconia

3D Master

Onde Estética e Função
se Encontram em
Perfeito Equilíbrio



Por que escolher 3D MASTER

Aconia 3D Master, a próxima geração de Aconia 3D Multilayer, redefine a zircônia multicamadas com desempenho superior em estética, função e estabilidade. É ideal para a fabricação eficiente de coroas estéticas monolíticas até pontes de grande extensão, especialmente pontes longas suportadas por implantes.

■ Dominando a estética e a função em perfeito equilíbrio



Durabilidade redefinida:

Com resistência à flexão de 800-1200 MPa e tenacidade à fratura de 5.8 MPa.m^{1/2}, o 3D MASTER garante confiabilidade para restaurações de alta carga, minimizando fraturas e retoques.

Estética natural:

Um gradiente perfeito em translucidez (51%-43%) reproduz a beleza natural dos dentes.

■ Resultados estéticos consistentes



Uma faixa flexível de sinterização de 1,520 °C a 1,560 °C oferece a liberdade de alcançar resultados estáveis e confiáveis a cada vez.

■ Glaze & Go

Não é necessário tingimento adicional. A coloração precisa e um efeito 3D sem costuras garantem restaurações de aparência natural.

■ Tranquilidade



Baixas deformações e alta tenacidade à fratura (≥ 5.8 MPa.m^{-1/2}) asseguram pontes precisas e duráveis, minimizando fraturas e reduzindo retoques.

■ Sinterização eficiente

Alcança uma sinterização de alta velocidade (90 minutos) com o BSM-FC30 e a curva de sinterização específica, aumentando a eficiência e reduzindo o tempo de entrega.

■ Solução de mascaramento perfeitamente combinada

Combine com o Líquido Opaco Aconia VI para soluções personalizadas de sombreamento que mascaram perfeitamente os pilares de implantes, proporcionando uma estética natural.



Tecnologia Multicamadas Aconia 3D




Estrutura de camadas entrelaçadas

Estrutura sem camadas, força de ligação homogênea entre camadas
Gradientes suaves em cor, resistência e translucidez



Indicações

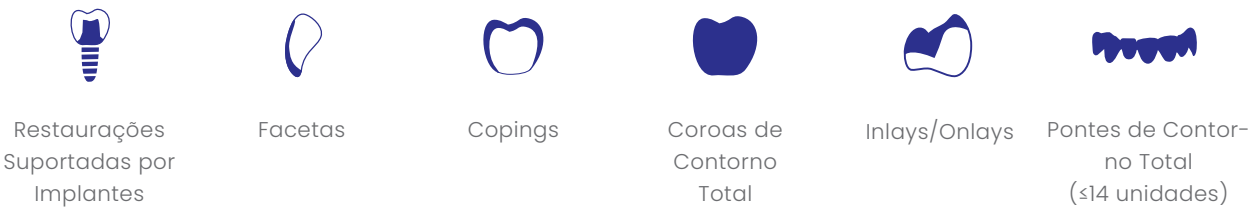

Parâmetros Técnicos


Sistema	98mm , 95mm (customized) etc.
Cor	A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,B3,B4,C1,C2,C3,C4,D2,D3,D4,0M1,0M2,0M3
Espessura do disco (Ø 98,5 mm)	12/14/16/18/20/22/25
Resistência à flexão (3 pontos)	800-1200MPa
Translucidez	43-51%
Dureza Vickers HV10	1250-1350
Densidade sinterizada	>6.02 (g/cm³)
Tenacidade à fratura	≥5.8(MPa.m ^{1/2})

Escaneie para fazer o pedido agora

Chance de ganhar amostras
grátis de produtos




■ Curva de sinterização

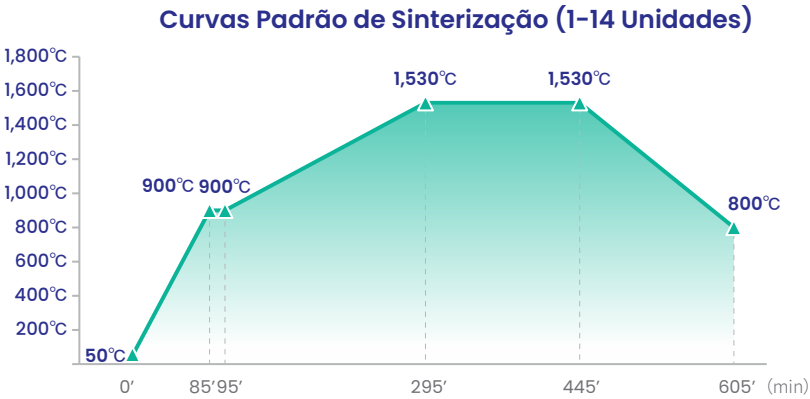

Parâmetros Padrão de Sinterização (1-14 Unidades)

Step	Time (Min)	Temp (°C)
1	0	50
2	85	900
3	95	900
4	295	1530
5	445	1530
6	605	800


*Recomenda-se utilizar fornos de sinterização BSM no modo Padrão.

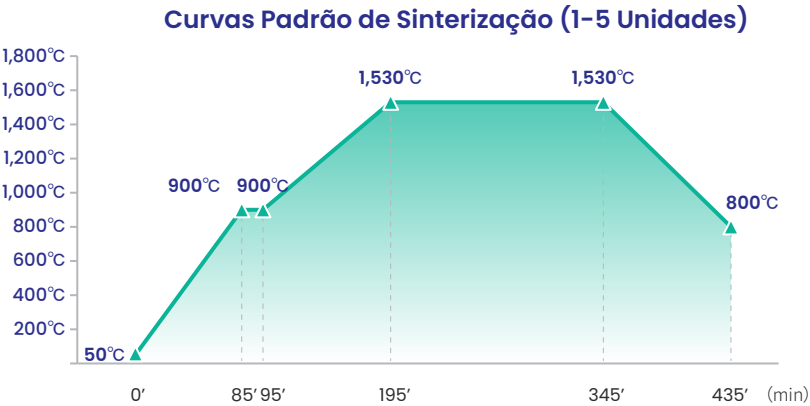

Parâmetros Padrão de Sinterização (1-5 Unidades)

Step	Time (Min)	Temp (°C)
1	0	50
2	85	900
3	95	900
4	195	1530
5	345	1530
6	435	800

*Recomenda-se utilizar fornos de sinterização BSM no modo Padrão.

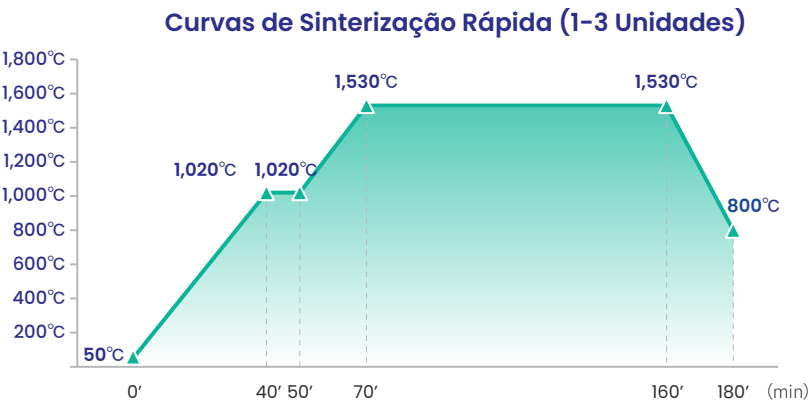

Parâmetros de Sinterização Rápida (1-3 Unidades)

Step	Time (Min)	Temp (°C)
1	0	50
2	40	1020
3	50	1020
4	70	1530
5	160	1530
6	180	800

*Recomenda-se utilizar fornos de sinterização BSM no modo Padrão.

■ Fluxo de trabalho digital

Eficiência incomparável, facilidade inimaginável

Digitalização

O scanner intraoral BSM Scan M3 e M5 coleta informações visualizadas e simultâneas do paciente em 10 minutos.

Design

A plataforma de design Smile Cloud oferece serviços de design personalizados para atender às suas necessidades, entregando resultados de design fascinantes.

Seleção de materiais

Aconia 3D Master oferece desempenho superior com excelência em estética e função.

Fresagem

A fresadora a seco de 5 eixos BSM-500D produz restaurações de zircônia de alta precisão com uma exatidão de fresagem de 5 µm.

Sinterização

O forno de sinterização de zircônia BSM-FC40 oferece sinterização rápida com capacidade de sinterizar até 80 coroas de uma vez.

Acabamento

Artamic Stain/Glaze, com sua ampla gama de sistemas de cores, é projetado para alcançar a personalização e caracterização desejadas em restaurações estéticas de alta qualidade.

